

ROBOOTER



ROBOOTER E60

Kullanım Kılavuzu



Shanghai Bangbang Robotics Co., LTD.

İÇİNDEKİLER

Değerli kullanıcılarımız:

Shanghai Bangbang Robotics'in elektrikli tekerlekli sandalyesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz

Co., LTD. Robooter E60 Ürün Kılavuzu, Robooter E60 Ürün Kılavuzu'nu sağlayan önemli bir belgedir.

Ürün bilgisi, çalışma yöntemleri ve satış sonrası servis bilgileri

Elektrikli tekerlekli sandalyenin. Kullanmadan önce, lütfen Robooter E60'ı dikkatlice okuyun

Doğru kullanımı ve bakımı için Ürün Kılavuzu. Bu kılavuz şunları içerir:

patent hakları ve telif hakkıyla korunan bilgiler. İçeriği kopyalamayın

Şanghay'ın yazılı izni olmaksızın kopyalamayı veya tamamen

Bangbang Robotics Co., LTD. Bu kılavuzun içeriği değişikliğe tabidir

önceden haber verilmeksizin. Ekipmanla ilgili en son bilgiler için lütfen şu adresi ziyaret edin:

Robooter web sitesi.



İÇERİĞİN İÇERİĞİ



1.Güvenlik önlemleri



2.Ürün tanıtımı



3.Bölüm tanıtımı
elektrikli tekerlekli sandalyenin



4.Elektrikli
tekerlekli sandalyenin kullanımı



5.Bakım ve sorun
giderme



6. Elektrikli tekerlekli sandalyenin
APP kullanımı kılavuzu



7.Sorumluluk Reddi



8.Paketleme listesi



9. İşaretleme açılımı

1.1 Sembol açıklaması



Uyarı

- Bu sembolün bulunduğu metin içeriği, dikkate alınmaması durumunda ciddi yaralanmalara yol açabileceği anlamına gelmektedir.



Notlar

- Bu sembolün bulunduğu metin içeriği, dikkate alınmaması durumunda hafif veya orta derecede hasar veya maddi zarar meydana gelebileceği anlamına gelir.

1.2 Bu ürünün uygulanabilir aralığı

- Yürüme ve hareket etmede zorluk çeken engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak.

1.3 Bu ürünü kullanmaya uygun olmayan kişiler



Uyarı

- Kontrendikasyonlar: Kullanıcılar dahil olmak üzere zihinsel sorunları olan hastalar Dikkatini veya yargısını geçici veya kalıcı olarak kaybedenlere izin verilmez Bu ürünü kullanmak için.

1.4 Elektrik güvenliğine yönelik önlemler



Notlar

Bu elektrikli tekerlekli sandalye ISO 7176-9'a göre testi geçti
İklim Testi.

- Bu test, elektrikli tekerlekli sandalye kullanıcıları nı n veya refakatçilerinin Elektrikli tekerlekli sandalyeyi yağmurdan güvenli bir yere taşımak için yeterli zaman; Elektrikli tekerlekli sandalyeyi fırtınalı havalarda çalıştırmayı n;
- Bu elektrikli tekerlekli sandalyeyi sağanak yağmur altında bırakmayı n;
- Bu elektrikli tekerlekli sandalyeyi uzun süre ıslak bir yerde bırakmayı n;
- Elektrikli tekerlekli sandalyeyi otomatik araç yıkama makinesinde yıkamayı n veya püskürtmeyin.
- Elektrikli tekerlekli sandalye doğrudan yağmura, sise veya ıslak havaya maruz kaldığı anda, elektriksel ve mekanik bir arıza meydana gelebilir veya paslanabilir.

1.5 Ürün kullanımı koşulları



Notlar

- Çevre sıcaklığı : -10°C~50°C; Bağıl nem: %20 ~%95
- Atmosfer basıncı : 70kpa~110kpa; Güçlü elektromanyetik girişim yok.
- Emniyet kemeri bir güvenlik aksesuarı olarak kullanılır; kullanıcı nı n emniyet kemerini kullanması nı önlemek için kullanılır. Elektrikli Tekerlekli Sandalye çalışırken durduğunda, aracı nı hızla durdurma işlemini sağlamak için kullanıcı nı n güvenliği.

1.6 Bertaraf hususları



Notlar

- Ürününüz yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak işlenecektir. evsel atıklardan ayrı olarak geri dönüştürülecektir. Ürün, yerel hükümet tarafından belirlenen geri dönüşüm noktasına getirilmeli ve toplama ve Bu ürünün geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasını kolaylaştırır.

1.7 Kullanı m sı rası nda alı nacak önlemler

(1) Eğimli arazilerde sürüş

Bu elektrikli tekerlekli sandalye, eğimli olmayan bir zeminde tı rmanma test gereksinimlerini geçti.

150kg yük ile 9°'yi aşan eğimlere tı rmanmaya çalış mayı n. 9°'yi aşan eğimlere tı rmanmaya çalış mayı n.

Yokuşta geri giderken lütfen elektrikli tekerlekli sandalyeyi yavaşlattı ğı nı zdan emin olun.

9°'yi aşan bir eğimde geriye doğru gidin. Geri giderken lütfen son derece dikkatli olun.

(2) Eğim tı rmanma ve sürüş mesafesi yetene ği, batarya ve takipten etkilenir.

çevre:

Örne ğin: Kullanı cı ları n a ğı rlı ğı ; Topografya (çimen veya çakı l gibi); Tepe eğimi;

Pil ömrü ve kullanı m ömrü; Aş ı rı sı caklı k; Bağlantı parçaları nı n kullanı mı ve a ğı rlı ğı vb.

(3) Frenleme

Elektrikli tekerlekli sandalye fren yaptı ğı nda lütfen oturun ve korkulu ğu sı kı ca tutun.

Üst kontrol kolunu serbest bır aktı ğı nı zda elektrikli tekerlekli sandalye saniyeler içinde duracaktır.

Not: Elektromanyetik fren hemen etkili olmayacak ve frenlemeden sonra etkili olacaktır.

tekerlek döner.

(4) Acil frenleme

Kritik bir durum veya beklenmeyen bir hareket olması durumunda, güç anahtarı tuşuna basarak elektrikli tekerlekli sandalye durdurucu (bu acil fren etkilidir, ancak,

(normal şartlarda kullanı ldı ğı nda).

Not: Acil frenin sı k kullanı lması motorun ar ı zalanması na ve daha fazla egele neden olabilir.

Elektrikli tekerlekli sandalyenin normal şekilde kullanı lması engellendi.

(5) Cep telefonunun kullanı mı

Mobil Uygulama ile hiçbir zaman tekerlekli sandalye sürmeyin. Lütfen dikkat edin

Sürüş sı rası nda yol durumu. Mobil Uygulama yalnız ca yardımcı olmak için kullanı labilir

hasta tekerlekli sandalyeyi hareket ettirir ve parametreleri ayarlar, tekerlekli sandalyeyi sürmek için KULLANILMAZ.

(6) Elektrikli tekerlekli sandalye, hareket halindeki bir araçta koltuk olarak sabitlenemez.

(7) Tüm aracı n h ı zı lastik bası ncı na, zemine ba ğlı olarak de ği şecektir.

çevre ve güç.

(8) Katlanı rken, tekerlekli sandalye 1. aç ı da kilitlenemez. Lütfen 2. veya

daha yüksek aç ı lar. Ambalaj kutusuna sı ğması için 2. aç ı da katlanması gerekir.

Lütfen trafik kuralları na uyun.

1.8 Özel uyarılar (lütfen dikkatlice okuyun)



1.8 Özel uyarılar (lütfen dikkatlice okuyunuz)

Yıllan sürüşü, yüksek hızda keskin dönüş ve diğer tehlikeli sürüşleri yapmayı n

Aksi takdirde elektrikli tekerlekli sandalye devrilebilir ve insan yaralanmaları na yol açabilir;

- Elektrikli tekerlekli sandalyeyi yürüyen merdivenlerde kullanmayı n, bu durum yaralanma riskini artırabilir.

yaralanmak;

- Motorlu taşı t şeridinde veya yayaları n olmadı ğı şeritte araç kullanmayı n;

- Su, yağ, buz veya diğer kaygan nesnelerin yüzeyinde sürmeyin. Aksi takdirde,

elektrikli tekerlekli sandalye kontrolden çı kabilir;

- 40 mm'lik engeli veya hendeği geçmeye çalışmayı n. Aksi takdirde, kişisel yaralanma meydana gelebilir.

sebeptir;

- Yüksek hızlı sürüş sı rası nda ani eğilme veya geriye doğru hareket yapmayı n;

- Elektrikli tekerlekli sandalyeye yolcu almayı n;

- Bağlantı elemanları nı , konnektörleri kontrol etmeden elektrikli tekerlekli sandalyeyi çalıştı rmayı n.

veya doğru bağlantı ve sabitleme için çı karılabilir parçalar. Lütfen her zaman ödeme yapı n

çevreye dikkat;

- Elektrikli tekerlekli sandalyenin herhangi bir parçası nı , bağlantı parçası nı veya adaptörünü tamir etmeyin.

yetkilendirme;

- Fren yapmadan yola çı kmayı n;

- Yargı lama yeteneğiniz etkilenebileceğinden elektrikli tekerlekli sandalyeyi kullanmayı n.

(içki içmek, uyuşturucu kullanmak veya ilaç almak gibi);

- Aniden kendinizi kötü hissettiğinizde elektrikli tekerlekli sandalyeyi çalıştı rmayı n;

- Görme yeteneğiniz ciddi şekilde zayı flamı şsa elektrikli tekerlekli sandalyeyi kullanmayı n;

- Yerel veya uluslararası yasaları n ihlali nedeniyle meydana gelen yaralanma kazası için veya

düzenlemeler nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz;

- Tüm fonksiyonlar ancak koltuğa doğru şekilde oturduğunuzda çalışı rmayı n;

- Ayakları nı zı pedalı n dı şı nda herhangi bir yere koymayı n;

- Elektrikli tekerlekli sandalyenin üzerine çı kmayı n;

- 9°'yi aşan eğimlerde inip çı kmaya çalışmayı n;

- 9°'yi aşan eğimlerde geri vites yapmayı n;

- Yokuşta sürüş yaparken kontrol sistemini serbest bırakı n ve elektrikli tekerlekli sandalyeyi kullanı n.

geri adı matabilir; ileri veya geri hareket ederken elektrikli tekerlekli sandalye yuvarlanabilir

Frenleme fonksiyonu devreye girmeden önce. Lütfen güvenliğe dikkat edin;

- Elektrikli tekerlekli sandalyeyi kullanmadan önce lütfen tüm elektrik bağlantı ları nı kontrol edin.

güvenlik ve güvenilirlik için parçalar;

- Çı karı lı mı ş olan kablo demeti parçaları nı ayı rmayı n, kesmeyin veya değıştirmeyin.

Herhangi bir koşulda elektrikli tekerlekli sandalyeye takı labilir.

- Kurşun asitli piller gibi diğ er niteliksiz pilleri kullanmayı n.

geri dönüştürülebilir, diğ er üreticilerin pilleri vb.

- Kurulumdan önce lütfen piller ve pillerle ilgili bilgileri okuyun.

ş arj cihazı .

- Elektrikli tekerlekli sandalye hareket halindeki bir araçta koltuk olarak sabitlenemez.

Yukarı daki şartları n ihlali halinde beklenmeyen zararlar doğ abilir.

1.9 Üreticinin beraberindeki belgelerdeki EMC ile ilgili yönergelerden ve ifadelerden alınmışlar

EMI Uyumluluk Tablosu (Tablo 1)

Fenomen	Uyumluluk	Elektromanyetik ortam
RF emisyonları	CISPR 11 Grup 1, Sınıf B	Evde sağlıklı hizmet ortamı
Harmonik bozulma	IEC61000-3-2 Sınıf A	Evde sağlıklı hizmet ortamı
Gerilim dalgalanmaları ve titreşim	IEC61000-3-3 Uyumluluğu	Evde sağlıklı hizmet ortamı

Tablo 1-Emisyon

EMS Uyumluluk Tablosu (Tablo2-5)

Fenomen	Temel EMC standardı	Bağımlı k test seviyeleri
		Evde sağlıklı hizmet ortamı
Elektrostatik Boşaltma	IEC 61000-4-2	±8kV temas ±2kV,±4kV,±8kV,±15kV hava
Yayılan RF EM alanı	IEC 61000-4-3	20V/dk 26MHz-2,5GHz 1kHz'de %80 AM 10V/m 80MHz-2.7GHz 1kHz'de %80 AM
Yakınlık alanları RD'den Kablosuz iletişimler teçhizat	IEC 61000-4-3	Tablo 3'e bakın
Anma gücü Sıklık Manyetik alanlar	IEC 61000-4-8	30A/m 50Hz veya 60Hz

Tablo 2-Muhafaza Bağlantı Noktası

Test Sıklığı (MHz)	Bant (MHz)	Bağımlı test seviyeleri
		Evde sağlıklı hizmet ortamı
385	380-390	Darbe modülasyonu 18Hz27V/m
450	430-470	FM,±5kHz sapma 18Hz sinüs,28V/m
710	704-787	Darbe modülasyonu 217 Hz sinüs, 28V/m
745	800-960	Darbe modülasyonu 18Hz sinüs, 28V/m
780		
810		
870		
930	1700-1990	Darbe modülasyonu 217Hz sinüs, 28V/m
1720		
1845		
1970		
5785		

Tablo 3 – RF kablosuz iletişim ekipmanları ndan yakınlık alanları

	Standart	Evde sağlıklı hizmet ortamı
Elektriksel hızlı Geçiciler/patlamlar	IEC 61000-4-4	±2KV 100kHz tekrarlama frekansı
Dalgalar Sattırma	IEC 61000-4-5	±0,5 kV, ±1 kV
Yürütülen Rahatsızlıklar RF alanları tarafından tetiklenen	IEC 61000-4-6	3V, 0.15MHz-80MHz 6V ISM bantları nda ve amatör radyo bantları nda 0,15MHz ile 80MHz arası nda 1kHz'de %80AM
Voltaj düşüşleri	IEC 61000-4-11	0% UT;0,5 çevrim 0°,45° 90°135°,180°,225°,270° ve 315°de
		0% UT; 1 döngü ve %70 UT;25/30 çevrim Tek faz: 0°de
Voltaj kesintileri	IEC 61000-4-11	0% UT; 25/30 çevrim UT=nominal giriş voltajı

Tablo 4 – Giriş AC güç bağlantı noktası

Fenomen	Temel EMC standardı	Bağı şı kılı k testi seviyeleri
		Evde sağı lı k hizmeti ortamı
RF alanları tarafı ndan oluşturulan iletilen bozulmalar	IEC61000-4-6	3V.0.15MHz-80MHz6V 0.15MHz ile 80MHz arası ndaki ISM bantları nda ve amatör radyo bantları nda 1kHz'de %80AM

Tablo 5 – Sinyal giriş/çı kılı ş parçaları portu

Kablo	Maksimum kablo uzunluğu, Ekranlı /ekransız		Sayı	Kablo sı nı flandı rması
AC Güç Hattı	1,8 milyon	Kalkansı z	1 Takı m	AC Güç
DC Güç Hattı (USB Kablosu)	0,95 milyon	Kalkansı z	1 Takı m	DC Güç

Tablo 6-Kablo bilgileri

2.1 Ürün özellikleri ve işlevleri

DC fırçasız yavaşlama motoru, elektrikli motoru sürmek için kullanı lan temel parçadı r tekerlekli sandalye.

- Motorun kontrolünü sağlamak için özel üst kontrolcü kullanı lmaktadır.

Bağı msız rocker çalı şması sayesinde ileri, farklı laştı rma ve dönüş, düşük hızda geri gitme ve diğer eylemler;

- katlama ve açma işlemi gerçekleştirilebilir;
- 30 dakikalık işlem yapı lmaması durumunda otomatik kapanma. Uygulama terminali otomatik kapanma süresini seçin: 30dk, kapanma yok;

● Seyir kontrol modu: "Hız" düğmesine 3 saniye bası lı n ve hız sabitleme modu. Ön rocker hızı sabitlemeyi başlatı r;


- Acemi modu: Acemi moduna girmek için Fn'e tı kladı n. Ses "Enter" komutunu verir.

acemi modu" ve ekran acemi modu simgesini görüntüler. İlk ve


ikinci vitesler opsiyoneldir. Hız vites limiti 2.

2.2 Ürünün ana yapı sı

BBR-E60-01/02/05/06

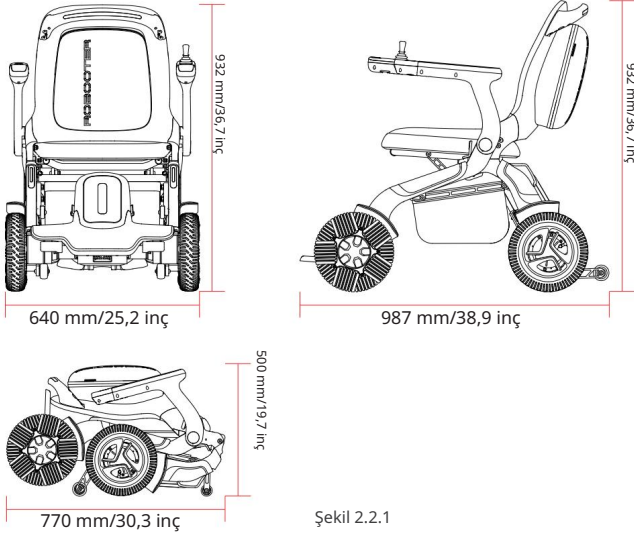

BBR-E60-03/04/07/08

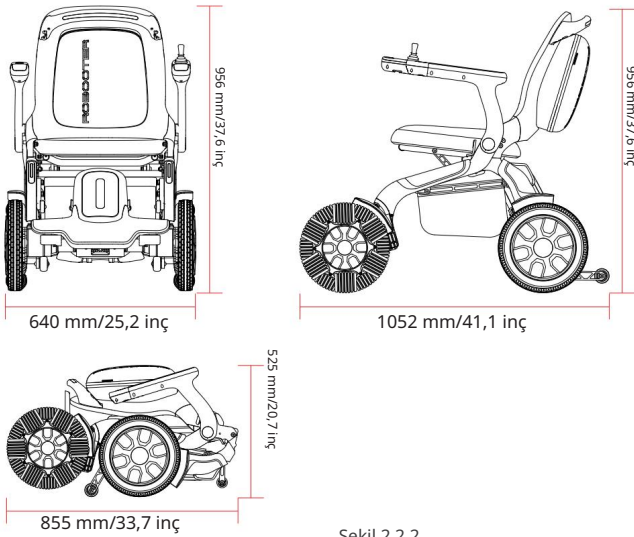

2.3 Ana teknik göstergeler (Kilometre sistemi)

Ortak ad	Elektrikli Tekerlekli Sandalye			
Ürün modeli	BBR-E60-01	BBR-E60-05	BBR-E60-02	BBR-E60-06
Tekerlekli sandalyenin tip sı nı fı : Sı nı f A, Sı nı f B veya Sı nı f C	B Sı nı fı		B Sı nı fı	
Ön ve arka tekerlek boyutları	10"		10"	
En büyüğü ile toplam uzunluk	987 mm		987 mm	
Genel genişlik	640 mm		640 mm	
Genel yükseklik	932 mm		932 mm	
Katlanmı ş uzunluk	770 mm		770 mm	
Katlanmı ş genişlik	640 mm		640 mm	
Katlanmı ş yükseklik	500 mm		500 mm	
En ağı r parçanı n kütlesi (pil hariç)	29 kilo		30,8 kilo	
Toplam kütlev	31,8 kilo	32,3 kilo	33,6 kilo	34,1 kg
Pil kütlesi	2,8 kilo	3,3 kilo	2,8 kilo	3,3 kilo
Statik stabilite yokuş yukarı ve aşağı	15°		15°	
Statik stabilite yanlara doğru	6°		6°	
Pil aralı ğı	25 km 20Ah	30 km 25 Ah	25 km 20 Ah	30 km 25 Ah
Yokuş yukarı dinamik denge	15°		15°	
Engelli ti rmanı şı	60 mm		60 mm	
Maksimum ileri hı z	Normal mod: 6 km/s Gelişmiş mod: 8 km/s		Normal mod: 6 km/s Gelişmiş mod: 8 km/s	
Maksimum hı zdan minimum fren mesafesi	1020 mm		1020 mm	
Koltuk düzlemi aç ısı	3°		3°	
Etkili koltuk derinli ği	430 mm		430 mm	
Etkili koltuk genişli ği	420 mm		420 mm	
Ön kenardaki oturma yüzeyi yüksekli ği	510 mm		510 mm	
Sı rtlı k aç ısı	18° (ayarlanabilir değil)		8-38° (ayarlanabilir)	
Sı rtlı k yüksekli ği	460 mm		460 mm	
Ayak dayana ğı ile koltuk mesafesi	415 mm		415 mm	
Bacak-oturma yüzeyi aç ısı	100°		100°	
Kol dayana ğı aralı ğı	480mm (ayarlanabilir değil)		455-515mm (ayarlanabilir)	
Kol dayana ğı ile koltuk mesafesi	230 mm		230 mm	
Kol dayana ğı yapı sı nı n ön konumu	500 mm		500 mm	
El çemberi çapı	Yok		Yok	
Aksı n yatay konumu	103 mm		103 mm	
Minimum dönüş yarı çapı	800 mm		800 mm	
Maksimum yolcu kütlesi	150 kilo		150 kilo	
Lastik şişirme bas ı nç aralı ğı	220 kpa-240 kpa		220 kpa-240 kpa	

Ortak ad	Elektrikli Tekerlekli Sandalye			
Ürün modeli	BBR-E60-03	BBR-E60-07	BBR-E60-04	BBR-E60-08
Tekerlekli sandalyenin tip sı nı fı : Sı nı f A, Sı nı f B veya Sı nı f C	B Sı nı fı		B Sı nı fı	
Ön ve arka tekerlek boyutları	12"		12"	
En büyüğü ile toplam uzunluk	1052 mm		1052 mm	
Genel genişlik	640 mm		640 mm	
Genel yükseklik	956 mm		956 mm	
Katlanmı ş uzunluk	855 mm		855 mm	
Katlanmı ş genişlik	640 mm		640 mm	
Katlanmı ş yükseklik	525 mm		525 mm	
En ağı r parçası n kütlesi (pil hariç)	32,2 kilo		34 kilo	
Toplam kütfe	35 kilo	35,5 kilo	36,8 kilo	37,3 kilo
Pil kütlesi	2,8 kilo	3,3 kilo	2,8 kilo	3,3 kilo
Statik stabilite yokuş yukarı ve aşağı	15°		15°	
Statik stabilite yanlara doğru	9°		9°	
Pil aralı ğı	25 km 20Ah	30 km 25 Ah	25 km 20Ah	30 km 25 Ah
Yokuş yukarı dinamik denge	15°		15°	
Engelli ti rmanı şı	80 mm		80 mm	
Maksimum ileri hı z	Normal mod: 8 km/s Gelişmiş mod: 10 km/s		Normal mod: 8 km/s Gelişmiş mod: 10 km/s	
Maksimum hı zdan minimum fren mesafesi	1020 mm		1020 mm	
Koltuk düzlemi aç ısı	4,5°		4,5°	
Etkili koltuk derinliğı	430 mm		430 mm	
Etkili koltuk genişliğı	420 mm		420 mm	
Ön kenardaki oturma yüzeyi yüksekliğı	510 mm		510 mm	
Sı rtlı k aç ısı	18° (ayarlanabilir değil)		8-38° (ayarlanabilir)	
Sı rtlı k yüksekliğı	460 mm		460 mm	
Ayak dayanağı ile koltuk mesafesi	415 mm		415 mm	
Bacak-oturma yüzeyi aç ısı	100°		100°	
Kol dayanağı aralı ğı	480mm (ayarlanabilir değil)		455-515 mm (ayarlanabilir)	
Kol dayanağı ile koltuk mesafesi	230 mm		230 mm	
Kol dayanağı yapı sı nı n ön konumu	500 mm		500 mm	
El çemberi çapı	Yok		Yok	
Aksı n yatay konumu	103 mm		103 mm	
Minimum dönüş yarı çapı	850 mm		850 mm	
Maksimum yolcu kütlesi	150 kilo		150 kilo	
Lastik şişirme bası nç aralı ğı	220 kpa- 240 kpa		220 kpa- 240 kpa	

2.4 Depolama koşulları

- Ambalajı n depolama sı caklı ğı -20°C60°C'dir;
- Bağ lı nem oranı %95'ten fazla olmamalı dı r;
- Atmosfer bası ncı 56110kPa olacaktı r;
- Elektrikli tekerlekli sandalye, havalandı rı lan bir odada muhafaza edilmelidir.

Korozyona neden olabilecek zararlı gazları n bası lması ve birikmesi yasaktı r;

- Paketlenmiş halde maksimum istif yüksekli ği 5 kattu r.
- Ürünü yüksek sı caklı ğa yakı n yerlerde saklamayı n.

Uzun süre do ğal kaynak veya do ğrudan güneş ış ığı na maruz bı rakmayı n.

- Ürün uzun süre kullanı lmayacaksa lütfen elektrikli

tekerlekli sandalye tam ş arjlı ve kapalı .

- Ürün bir aydan uzun süre saklanacaksa lütfen tam ş arj edin ve ardı ndan

depolamaya ve kullanmaya devam edin.

3. Elektrikli tekerlekli sandalyenin bölüm tanı tı mı



Şekil 3.1

4.1 Kullanım bildirimi

- Lütfen kullanmadan önce Ürün Kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ürünün

parçalarını güvenliğini sağlayacak şekilde iyi durumda olduğundan emin olun;

- Elektrikli tekerlekli sandalye ilk kez çalıştırıldığında düz ve sert zemin

Sondaj alanını zırtın herhangi bir gücüne maruz kalmamasını sağlamak için mümkün olan en kısa sürede seçilmelidir.

bariyer veya yaya;

- Motoru ve üst kontrol cihazını kendiniz çıkarmayın. Değiştirme

Gerekirse, yetkili bayiden orijinal parçaları satın alın;

- Elektrikli tekerlekli sandalye yapay olarak değiştirilirse, orijinal olmayan parçaları kullanılması

garanti sorumluluğundan muaf tutulmak;

- Elektrikli tekerlekli sandalyeyi küçük yaşta kiler veya engelli olmayan diğer kişilere vermeyin.

elektrikli tekerlekli sandalye için uygundur;

- Sürüş sırasında aşırtı yüklemeyin (elektrikli tekerlekli sandalyenin maksimum yükü 150 kg'dır);

1 kişi ile sınırlıdır;

- Elektrikli tekerlekli sandalyenin tamamen genişletilmiş olduğundan emin olun;

- Elektrikli tekerlekli sandalyenin emniyet kemerini taktığınızdan emin olun;

- Elektrikli tekerlekli sandalyeye doğru bir şekilde oturduğunuzda ve üst kısmı hafifçe ittiğinizde

kontrol kolu, elektrikli tekerlekli sandalye ileri, geri hareket edecek, sola dönecek veya dönecek

sağ; Elektrikli tekerlekli sandalye serbest bırakıldıktan sonra durdurulacaktır. Bu temel egzersizi uygulayın

becerikli oluncaya kadar çalışmaya devam edin;

- Direksiyonu çevirirken lütfen yakınındaki bariyerleri temizleyin;

- Lütfen trafik kurallarına uyun ve trafiğin güvenli bir şekilde ilerlemesi için motorlu olmayan şeritte sürün.

sizin ve başkalarının güvenliği. Lütfen yavaş sürün ve başkalarını almayın;

- Elektrikli tekerlekli sandalye nispeten zorlu bir ortamda çalıştırıldığında (örn.

(gişide veya dönüşte) elektrikli tekerlekli sandalye yavaşça çalıştırılmalıdır.

Elektrikli tekerlekli sandalyenin hızını sert zeminlerde en düşük seviyeye indirilmesi önerilir

ortamlar;

- Elektrikli tekerlekli sandalyenin iyi durumda olup olmadığı, örneğin


performans normal;

- Elektrikli tekerlekli sandalye 30 dakika boyunca hareketsiz kaldığında otomatik olarak kapanacaktır;

- Elektrikli tekerlekli sandalye kullanırken radyo vericisine yakını olmaktan kaçınılmalıdır. Yüksek güçlü el tipi radyo vericisi veya alıcısı ;
- Ürün Kılavuzunda herhangi bir hata veya iyileştirme yeni kılavuzda belirtilecektir. Şartname. Herhangi bir zamanda pazar ihtiyaçlarını karşılamak için yeni ürünler piyasaya sürebiliriz. İlgili işlevsel açıklama ile performans arasında herhangi bir fark var mı ? ve bu kılavuz, belirli ürünler ve ilgili ek talimatlar geçerli olacak ve bu kılavuzda belirtilmeyecektir;

4.2 Elektrikli tekerlekli sandalyenin genişletilmesi ve katlanması

4.2.1 Genişletme ve katlama çalıştırma modu

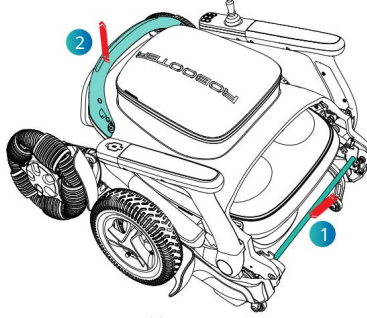


Şekil 4.2.1.1

Genişleyen çalıştırma modu: Elektrikli tekerlekli sandalyeyi manuel olarak genişletirken lütfen

bir elinizle katlama anahtarını (Şekil 4.2.1.1'deki konum 1) tutun ve diğer elinizle kol dayanağını yukarı çekin

(Şekil 4.2.1.1'deki konum 2) elektrikli tekerlekli sandalye tamamen açılana kadar;

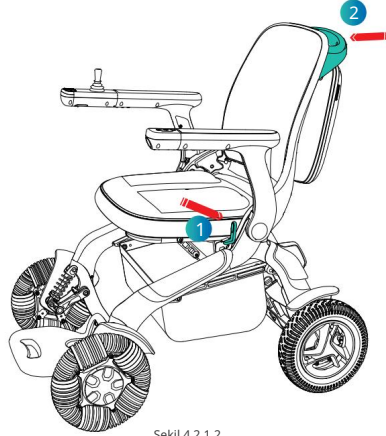

Şekil 4.2.1.2


Katlama çalıştırma modu: Elektrikli tekerlekli sandalyeyi manuel olarak katlarken lütfen katlama düğmesine basın.

Bir elinizle anahtarı çevirin (Şekil 4.2.1.2'deki konum 1) ve diğer elinizle kol dayanağını yukarı çekin (konum

Şekil 4.2.1.2'deki 2) elektrikli tekerlekli sandalye tamamen katlanana kadar;

Açık kılamlar: Elektrikli tekerlekli sandalyeyi katlamadan önce, hasar görmesini önlemek için saklama sepetindeki eşyaları boşaltın.

4.2.2 Kelepçe önleyici

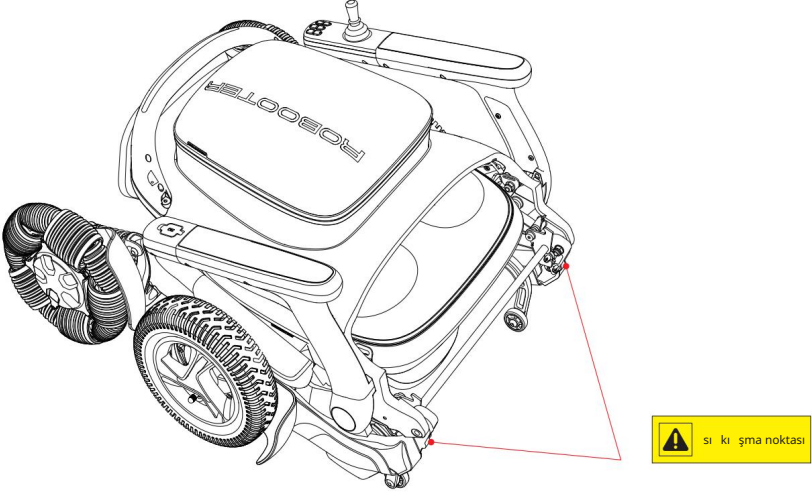

Not: Katlama/açma işlemleri sırasında, anti-kelepçe kılavuzunda belirtilen pozisyona temas etmeyin;


4.3 Üst kontrolör

4.3.1 Üst denetleyiciye giriş



Şekil 4.3.1

4.3.2 Üst denetleyicinin işlev açılımı

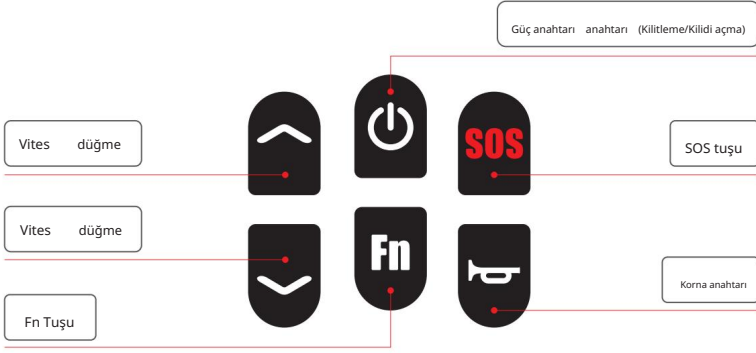

Şekil 4.3.2

(1) Yönlendirme rocker'ı

Üst kontrolör rocker'ı na basmak, elektrik hızını ve yönünü kontrol edebilir

tekerlekli sandalye;

(2) Güç anahtarı anahtarı

Güç kaynağı na açmak için 3 saniye boyunca uzun bası n ve güç kaynağı na açmak için 3 saniye boyunca uzun bası n
güç kaynağı kapalı ;

Araç kilitleme fonksiyonunu açmak için güç anahtarı na bası n;

Tüm aracı n kilidini açmak için güç anahtarı na bası n ve mevcut durum

kilidi açı ldı ;

(3) Vites düğme

Bir dişli eklemek için " " tuşuna bası n (En fazla 5 dişli);

(4) Vites düğme

Basmak " " bir vitesi düşürmek (en az 1 vites);

(5) Korna tuşu

Korna tuşuna bir kez bası n, korna bir kez çalacaktır ;

(6) SOS tuşu

Elektrikli tekerlekli sandalyenin SOS alarmı nı çalması için 3 saniye bası lı tutun;

(7) Fn tuşu

Acemi moduna girmek için Fn tuşuna bası n ve ekranda 1. vites, 2. vites ve

"Novice moduna girin" sesli uyarı sı yla birlikte NOVICE simgesi. Hız dışıslı

limit 2 (birinci ve ikinci vitesler opsiyoneldir).

Genel moda girmek için Fn tuşuna 5 saniye boyunca uzun bası n ve ardından tekrar Fn tuşuna uzun bası n

Genel moddan çıkmak için 5 saniye; Uygulama ayarlamaları APP işletiminde ayrıntılı olarak açıklanmıştı r talimatlar.

Lastik boyutu 10 inç olduğunda: (BBR-E60-01/BBR-E60-02/BBR-E60-05/BBR-E60-06)

Genel modda (Şekil 5), Maksimum hız 6 km/saattir. Geliştirme modunda (Şekil 5),


Maksimum hız 8 km/saattir.

Lastik boyutu 12 inç olduğunda: (BBR-E60-03/BBR-E60-04/BBR-E60-07/BBR-E60-08)

Genel modda (Şekil 5), Maksimum hız 8 km/saattir. Geliştirme modunda (Şekil 5),

Maksimum hız 10 km/saattir.

4.3.3 Ekran menüsü açılması

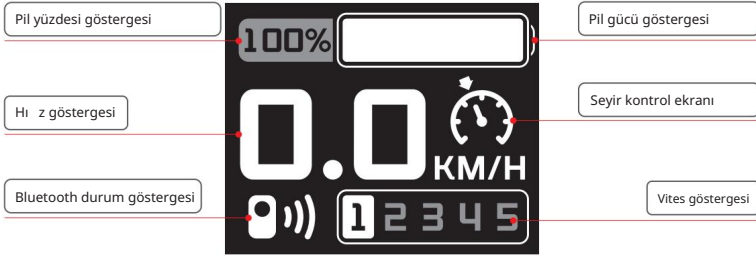

Şekil 4.3.3.1

(1) Pil yüzdesi göstergesi (Şekil 4.3.3.1'de gösterildiği gibi)

Elektrikli tekerlekli sandalyenin üst kontrol ekranı pil durumunu % olarak gösterir;

(2) Hız göstergesi (Şekil 4.3.3.1'de gösterildiği gibi)

Üst kontrol ekranı elektrikli tekerlekli sandalyenin sürüş hızını gösterir

(birim: km/h);

Gösterilen hızın hassasiyeti $\pm 5\%$ 'tir;

(3) Bluetooth durum ekranı (Şekil 4.3.3.1'de gösterildiği gibi)

Bluetooth bağlantısı olmadan, Bluetooth gösterge işareti ekranda görüntülenmez.

ekran;

Bluetooth bağlantısı ile ekranda Bluetooth gösterge işareti çıkar;

(4) Pil gücü göstergesi (Şekil 4.3.3.1'de gösterildiği gibi)

Üst controlcü güç durumunu gerçek zamanlı olarak görüntüler;

(5) Seyir kontrolü ekranı (Şekil 4.3.3.1'de gösterildiği gibi)

- Seyir kontrolüne girmek için "Hız" düğmesini 3 saniyeden uzun süre basılı tutun

modu. Elektrikli tekerlekli sandalye üst kontrol ekranı seyir kontrolünü görüntüler

simgesi ve ses iki kez uyarır. Seyri başlatmak için rocker'ı öne doğru itin

kontrol;

- Seyir kontrolünden çıkma için kilit tuşuna bası n veya sallanan düğmeyi geriye doğru hareket ettirin (bkz.

daha az sürüş durumu);

- Seyir kontrolü işlevi yalnızca kilitli değilken tetiklenebilir ve kilitlenemez.

kilitli moda tetiklendi;

- " " Ve " " Seyir kontrolü sürecinde hızları ayarlamak için kullanı labilir;
- Seyir kontrolü işlemi sı rası nda bükülmeyi kontrol etmek için rocker'ı çevirin;
- Seyir kontrol moduna girdikten sonra seyir kontrol modu başlatı lmazsa

5 saniye içinde seyir kontrol modundan otomatik olarak çı kılacak ve sesli uyarı

"Bekleme süresi dolduğunda, hız sabitleme modundan otomatik olarak çı kıl dı " mesajı görüntülenecektir.

Verilen.

(6) Hız göstergesi (Şekil 4.3.3.1'de gösterildiği gibi)


Bir dişli eklemek için " " tuşuna bası n (En fazla 5 dişli)

Basmak " " bir hızı düşürmek (en az 1 hız);

Yukarı daki işlevler APP'de de gerçekleştirilebilir (Uygulama,

farklı dişliler);

Elektrikli tekerlekli sandalyenin üst kontrol ekranı hız vites hız nı gösterir.

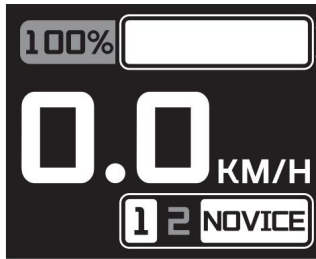

Şekil 4.3.3.2

(7) Acemi modu ekranı (Şekil 4.3.3.2'de gösterildiği gibi)

Acemi moduna girmek için Fn tuşuna bası n ve ekranda 1. hız, 2. hız ve

NOVICE simgesi, "Novice moduna girin" sesli uyarı sı yla birlikte. Hız

hız limiti 2 (birinci ve ikinci hızlar opsiyoneldir).



Şekil 4.3.3.3

(8) Arıza kodu gösterimi (Şekil 4.3.3.3'te gösterildiği gibi)


Ürünün dahili bilgi tanımlayıcısı tarafından görüntülenen tanımlama kodu için içerik için 5.2 sorun giderme bölümüne bakın.



Şekil 4.3.3.4

(9) SOS ekranı (Şekil 4.3.3.4'te gösterildiği gibi)

SOS çağırısını başlatmak için SOS düğmesine 3 saniye boyunca uzun basın. Ekranda SOS simgesi görüntülenir ve yarıp söner.

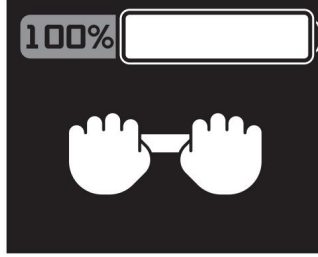


Şekil 4.3.3.5

(10) İtme modu ekranı (Şekil 4.3.3.5'te gösterildiği gibi)

Aynı anda "Hız" ve "Hız" düğmelerini basılı tutun.

3 saniye boyunca ve

itme modu simgesi elektrikli aracı n üst kontrol ekranı nda görüntülenecektir.
tekerlekli sandalye.

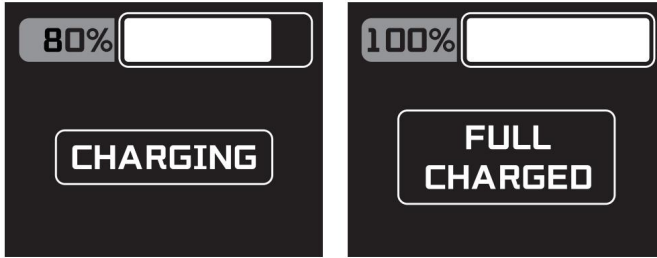

Şekil 4.3.3.6

(11) Pil şarj durumu göstergesi (Şekil 4.3.3.6'da gösterildiği gibi)

Elektrikli tekerlekli sandalyenin şarj portu şarj cihazı na bağlandı ktan sonra,


Üst kontrol ekranı ŞARJ EDİLİYOR simgesini gösterecek, bu da elektrikli

tekerlekli sandalye şarj ediliyor;

Elektrikli tekerlekli sandalye tamamen şarj olduktan sonra üst kontrol ekranı şu şekilde görüntülenecektir:

TAM ŞARJLI simgesi, elektrikli tekerlekli sandalyenin şarj edildiğini gösterir.


4.4 Kol dayanağı dokunmatik ışığı ve USB şarj portunun kullanımı

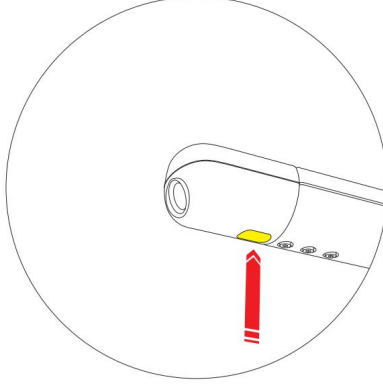

Şekil 4.4.1

Sol üst kontroldeki alt kol dayanağı lambası nın dokunmatik düğmesine dokununuz

Kol dayanağı dokunmatik lambası nın ışığı nı açıp kapatın. (Şekil 4.4.1'de gösterildiği gibi)

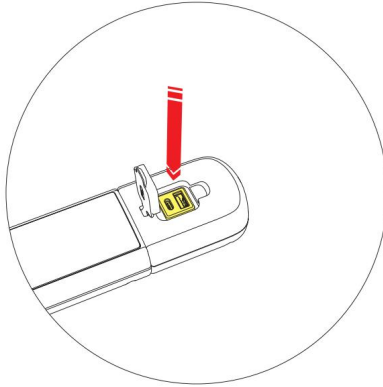


Şekil 4.4.2

Kol dayanağı dokunmatik lamba tertibatı iki adet USB şarj portu sağlar (USB Type-A

USB Type-C). (Şekil 4.4.2'de gösterildiği gibi)

4.5 Sol ve sağ korkuluklar

4.5.1 Sol ve sağ kol dayanağı kumandalarını değiştirilebilir çalışma modu

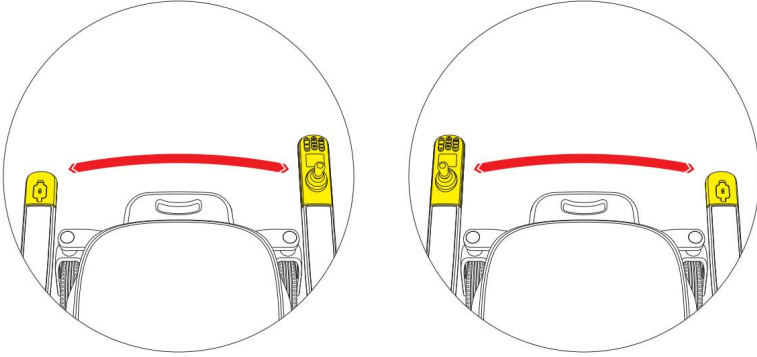


Şekil 4.5.1

Adım 1, lütfen sol ve sağı değiştirmeden önce makinenin gücünü kapatın ve kol dayanağı kumandalarını .

Adım 2, kol dayanağı kontrol ünitesinin altındaki üç alyan vidayı çıkarmak için altıgen anahtar kullanın ve sol ve sağ kontrol ünitelerinin bağlantı kablolarını açın.

Adım 3, sol ve sağ kontrolörleri değiştirin, kablo demetini bağlayın, sol ve sağ kontrolörleri kol dayanağı kontrol kartı yuvasına takın ve altıgen soket vidalarını kilitlemek için altıgen anahtar kullanın. (Şekil 4.5.1'de gösterildiği gibi)

4.5.2 Sol ve sağ kol dayanağı kontrol ünitesinin vites ayarlama çalışma modu

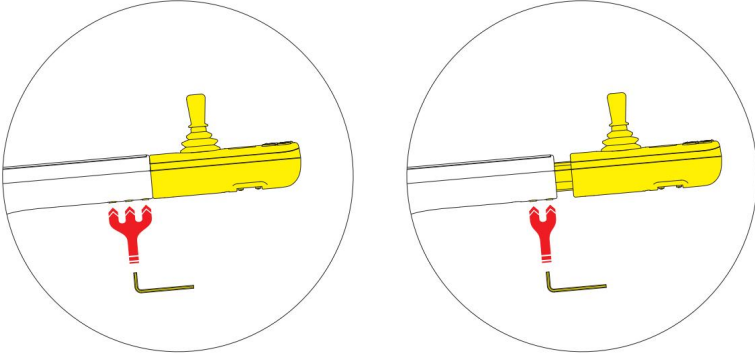

Şekil 4.5.2

Adım 1, sol ve sağ vitesi ayarlamaadan önce lütfen makinenin gücünü kapatın.


sağ kol dayanağı kumandaları.

Adım 2, kol dayanağı kontrolünün altındaki üç Allen vidasını çıkararak karmak için bir altıgen anahtar kullanın. Her iki kontrolör bir vites için doğru hareket eder.

Adım 3, altıgen soket vidasını kilitlemek için altıgen anahtarı kullanın. (Şekil 4.5.2'de gösterildiği gibi)


4.6 Pil

4.6.1 Pilin sökölmesi

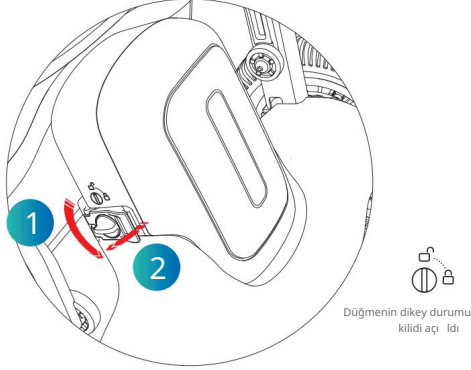


Şekil 4.6.1.1

(1)Adı m 1'de, pil kutusunun sol düğmesini elle döndürün ve sol düğmeyi kilit açma konumuna getirin. Ardı ndan pil sol tokası nı açı n. (Şekil 4.6.1.1'de gösterildiği gibi)

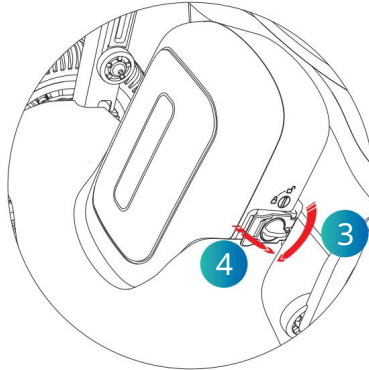

Şekil 4.6.1.2


(2)Adı m 2'de, pil kutusunun sağ düğmesini elle döndürün ve sağ düğmeyi kilit açma konumuna getirin. Ardı ndan pil sağ tokası nı açı n. (Şekil 4.6.1.2'de gösterildiği gibi)

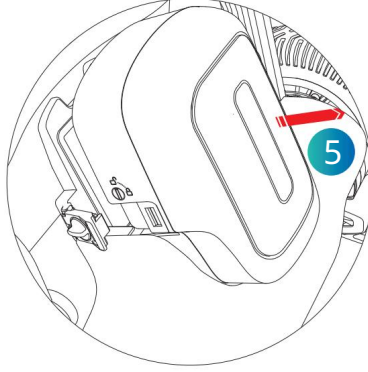

Şekil 4.6.1.3


(3) Adım 3'te, pili şekilde gösterilen yönde çıkarın. (Şekil 4.6.1.3'te gösterildiği gibi)

4.6.2 Pil Kurulumu

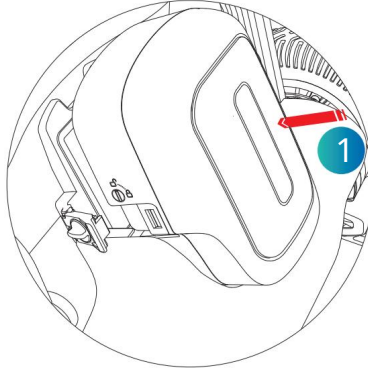

Şekil 4.6.2.1


1 Adım 1'de, pili gösterilen yönde hücre yuvasına yerleştirin. (Gösterildiği gibi Şekil 4.6.2.1)

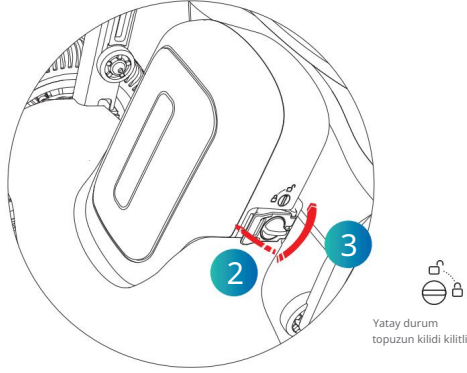

Şekil 4.6.2.2

2Adım 2'de, pilin sağ tokası otomatik olarak kapanır ve pilin sağ düğmesini döndürün. Pil kutusunu sağ düğmeyi kilitli konuma getirin. (Şekilde gösterildiği gibi)


4.6.2.2)

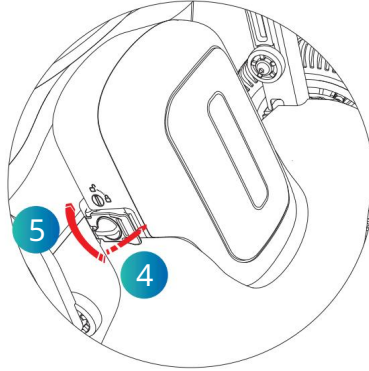

Şekil 4.6.2.3

3Adım 3'te, pil sol tokası otomatik olarak kapanır ve pil kutusunun sol düğmesini sol düğmeyle kilitli konuma getirin. (Şekil 4.6.2.3'te gösterildiği gibi)


4.7 İtme moduna geçiş

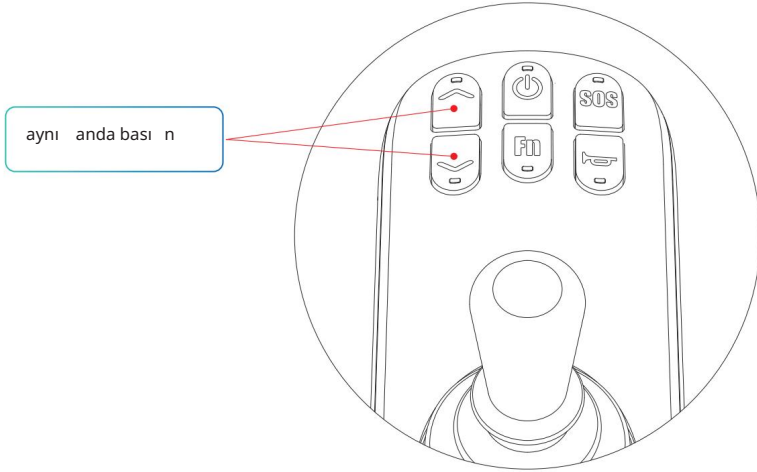

Şekil 4.7


' ' tuşuna basılmalı ve ' ' itme moduna girmek için aynı anda tuşuna basılmalı. Sallanma düğmesini sallayarak itme modundan çıkabilirsiniz; (Şekil 4.7'de gösterildiği gibi)

4.8 Elektrikli tekerlekli sandalye şarj modu

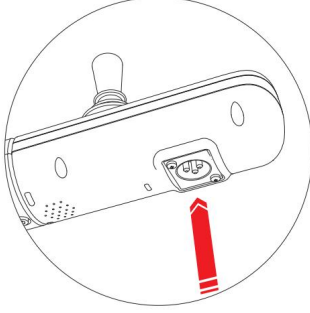

Şekil 4.8.1

Şarj yöntemi I: Şarj cihazı nı bağlayın ve şarj için şarj fişini üst kontrol cihazı na takın; (Şekil 4.8.1'de gösterildiği gibi)

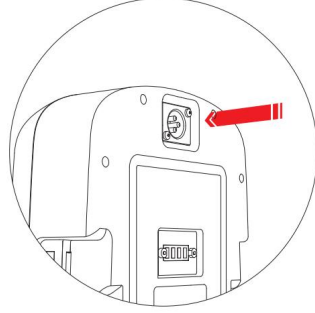


Şekil 4.8.2

Şarj yöntemi II: Pili çıkarın, şarj cihazı nı n fişini pilin şarj portuna takın ve şarj edin; (Şekil 4.8.2'de gösterildiği gibi)


4.9 Cihaza giriş

Koltuğa yandan erişim 1Gücün
kapalı olduğundan emin olun.

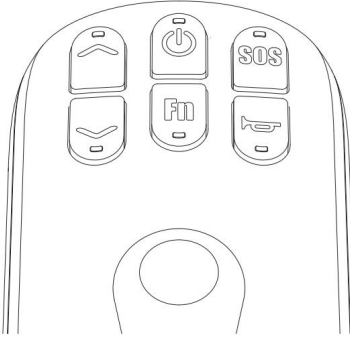


Şekil 4.9.1

2Kol dayanağını kaldırmak.

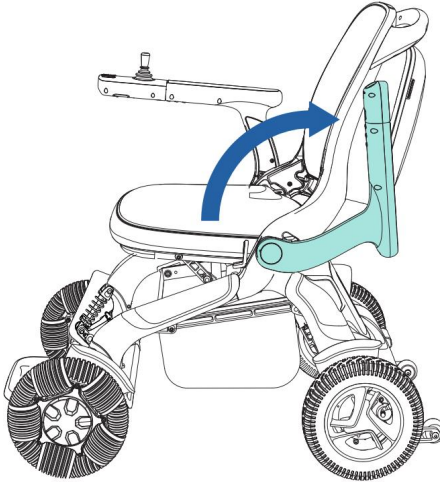

Şekil 4.9.2

3 Elinizde tuttuğunuz kulp ile ayak dayanağı nı kaldı rı n.

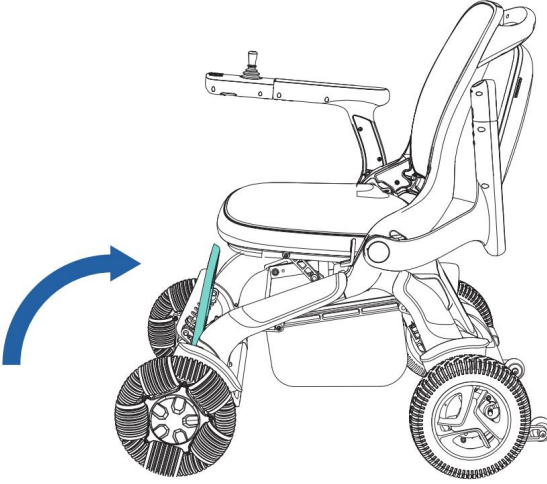


Şekil 4.9.3

4 Koltuğa oturun.




Şekil 4.9.4

5Kol dayanağı nı öne doğru döndürün.

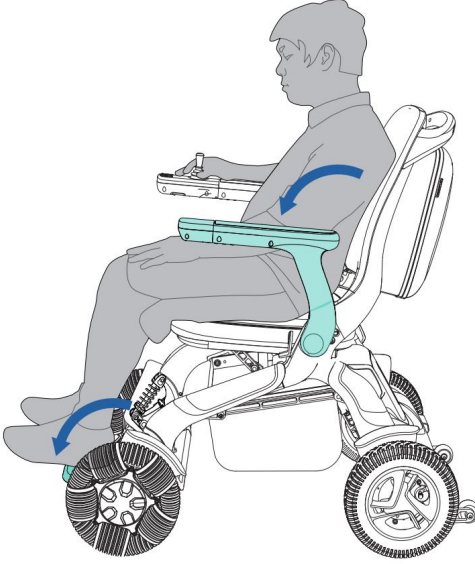

6Emniyet kemerini takın.

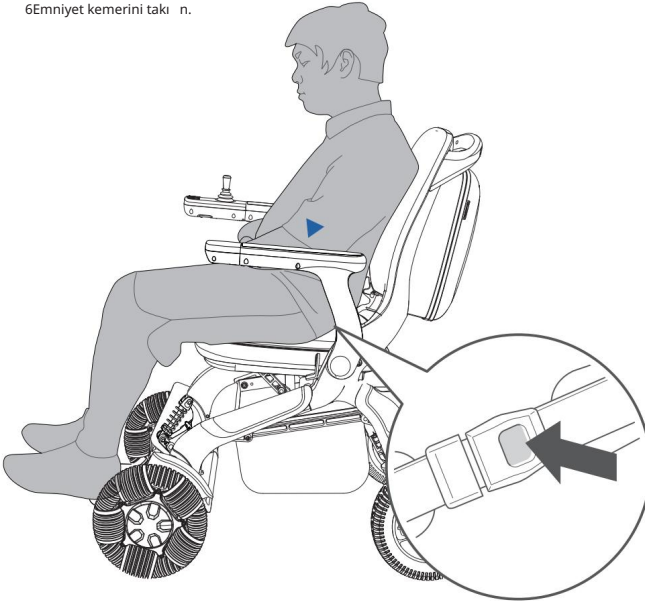


7Önyükleme.

8Sürüş.

4.10 Kol Dayanağı Mesafesinin Ayarlanması

Kol dayanağı nı n altı nda bulunan iki düğmeyi gevşetin ve istediğiniz pozisyona ayarlayın.

Uygun pozisyona geldikten sonra düğmeleri sıkın.

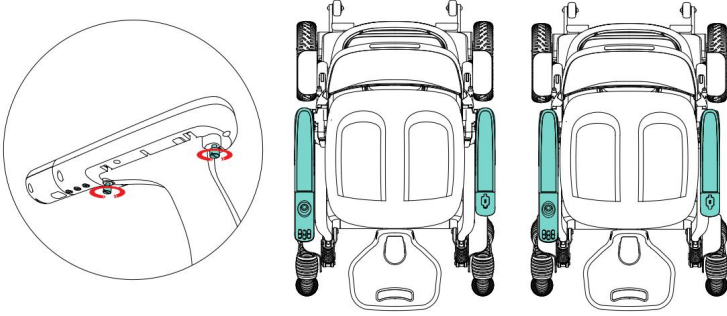

En dışı taraf


En içi taraf

Şekil 4.10

4.11 Sırtlı Koltuğu nı n Ayarlanması

İki Pin kolunu dikey olarak geriye doğru çekin ve istediğiniz konuma ayarlayın.

Uygun pozisyonda, Pin kolları nı yerlerine sabitleyin.

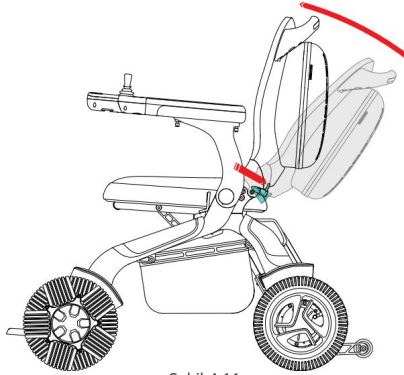

Şekil 4.11



Notes

Katlanırken tekerlekli sandalye 1. açı da kilitlenemez. Lütfen 2. veya daha yüksek açıları kullanın.

Ambalaj kutusuna sığması için 2. açıyla katlanması gerekmektedir.

5.1 Günlük nokta denetimi ve bakımı

- Elektrikli tekerlekli sandalye kullanıcıları veya operatörü, aşağıdaki hususlardan sorumludur:

temizlik, muayene ve bakımı;

- Elektrikli tekerlekli sandalyenin genel bakımı şunları içerir: Temiz

elektrikli tekerlekli sandalyeler, lastikleri kontrol edin, pilleri kontrol edin;

- Önerimiz: Elektrikli tekerlekli sandalyenin 6 ayda bir kontrol edilmesidir.

aylar;

- Elektrikli tekerlekli sandalyenin temizlenmesi gerektiğinde, üst kumanda

temiz havluyla silinmelidir;

- Düzenli olarak (sıfırlanmış) olarak haftalık veya aylık kontrol edin.

gevşetme, düşürme ve sabitleme için bağlantı parçaları (vidalar ve somunlar gibi)

korozyon vb.;

- Katlanabilir parçaların sıkışması, kırılması, düşüp düşmediğini ve

diğer koşullar;

- Lastikleri aşınma ve ciddi aşınma vb. açısı ve düzenli olarak

- kontrol edin; Yağmur veya ıslak havalarda elektrikli tekerlekli sandalye silinmelidir.

nemden dolayı paslanmayı önlemek için mümkün olduğunca kurutun;

- Elektrikli tekerlekli sandalyeler sıcak havalarda güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır.

hava durumu.

5.2 Elektrikli tekerlekli sandalyenin performans arıza tablosu

Hata kodu	Anomali durumu	Arıza olayı
E1	Anahtar anormallik	İlgili tuş fonksiyonu çalışmıyor.
20	Salıncak topraklama hattı bağlantısı kesildi	Sallanma fonksiyonu çalışmıyor.
21	Salıncak güç kablosu bağlantısı kesildi	Sallanma fonksiyonu çalışmıyor.
22	Salıncak X eksenli bağlantısı kesildi	Sallanma fonksiyonu çalışmıyor.
23	Salıncak Y eksenli bağlantısı kesildi	Sallanma fonksiyonu çalışmıyor.
24	Salıncak sensörü olmayan bir bağlantı girişi	Sallanma fonksiyonu çalışmıyor.
E6	CAN iletişimi anormal	Salıncak kontrol edilemez Elektrikli tekerlekli sandalyenin sürüşü.
E7	FLASH hatası	FLASH aygıtı kimliği algılanamıyor ve cihaz çalışmaz.
82	Sol motor Hall arızası	Sol motor Hall bağlı değil veya arızalı, motor çalışmıyor.
81	Sağ motor Hall hatası	Sağ motor Hall bağlı değil veya arızalı, motor çalışmıyor.
40	Sol motorun elektromanyetik freninde düz	Sol motorun elektromanyetik fren kolunu serbest bırakmak için elektromanyetik freni kapatın.
41	Sağ motorun elektromanyetik freninde düz	Sağ motorun elektromanyetik fren kolunu serbest bırakmak için elektromanyetik freni kapatın.
80	Düşük voltaj arızası	Motor çalışmıyor.
88	Ön şarj hatası	Motor çalışmıyor.
84	Alt kısma devre arızası Sağ motorda MOS dişili	Motor çalışmıyor.
85	Sağ motorda üst dişi MOS'unda kısa devre arızası	Motor çalışmıyor.
86	Sol motorda üst dişi MOS'unda kısa devre arızası	Motor çalışmıyor.
87	Alt kısma devre arızası sol motordaki MOS dişili	Motor çalışmıyor.
90	Yüksek voltaj arızası	Çalıştırmadan önce yüksek basıncı algıladıktan sonra kilitleti tutun.
91	Sol motor faz kaybı ve bağlantı kopukluğu hatası	Motor çalışmıyor.
92	Sağ motor faz dişili ve bağlantısı kesilmiş	Motor çalışmıyor.
93	Sol motor ve sağ motor faz dişili ve bağlantısı kesilmiştir	Motor çalışmıyor.
94	Sağ motor durması	Motor çalışmıyor.
95	Sol motor durması	Motor çalışmıyor.
96	Sol ve sağ motorlar sensörü çalışmıyor	Motor çalışmıyor.

Tablo 5.2

5.3 Güvenlik uyarısı talimatı

Sesli komutlar	İlgili sahne açma klaması .
Acemi moduna girin	Acemi modu butonuna basınız .
Acemi modundan çıkın	Acemi modu butonuna tekrar basınız .
Uyarı	SOS'u tetiklemek için SOS tuşuna uzun basınız .
KİLİT	Ürün açıldıktan sonra varsayılan olarak kilitlenir. Kilitsiz durumu kilitli duruma getirin.
Kilidini aç	Kilitli durumunu kilitsiz duruma getirin.
Uzaktan kumandayı başlat	Uzaktan kumanda veya APP Bluetooth başarıyla bağlandığında sesli uyarı .
Güncelleme	APP yeni bir sürüm algıladığında, yükseltmek için tıklayınız .
Yükseltme tamamlandı	Tek modül yükseltmesinin sonu.
Yükseltme	Ekipmanlar yenileniyor.
Anahtar ton	İstem sesini üretmek için düğmeye dokununuz.
Şarj etme	Şarj etme
Şarj tamamlandı	Şarj cihazı nı çıkarınız ve şarjı nı tamamladığınız nı belirten sesli uyarıyı tetikleyin.
Kıvrak fren	Bant tipi fren açılır .
Bluetooth bağlandı	Uzaktan kumanda veya APP Bluetooth başarıyla bağlandığında sesli uyarı .
Sürücü koruması	Sürücü arızası için sesli uyarı .
Makine koruma	Makine arızası durumunda sesli uyarı .
Salıncak koruması	Salıncak arızası için sesli uyarı .
Bluetooth bağlantısı kesildi	Uzaktan kumanda veya APP Bluetooth bağlantısı kesildiğinde sesli uyarı .
Yükseltme başarıyla oldu	Yükseltme sırasında bir sorun oluştu.
Korna sesleri	Korna tuşuna basınız .
Düşük pil, lütfen şarj edin	Güç %20'nin altına düştüğünde tetiklenir.
Bluetooth ile aracı kilidini açma	Kilidi açmak için uzaktan kumandaya basınız .
Uygulama modu	" " tuşuna uzun basınız ve itme " " 3 saniye boyunca düğmeye basınız n moduna geçin, itme modu uyarısı eşliğinde.
Uygulama modundan çıkın	İtme modundan çıkınmak için sallanan kolu sallayınız .

Tablo 5.3

5.4 Üretim tarihi ve hizmet ömrü

- Bu ürünün hizmet ömrü, ürün teslim edildikten sonra 5 yılıdır. Lütfen kullanıcının geçerlilik tarihi içinde. Son kullanma tarihi geçmişse, ürünü kullanmaktan kaçınılmalıdır. Kaza meydana gelmesi.
- Üretim tarihi için ürün etiketine bakılmalıdır.

5.5 Ürün temizleme yöntemi

- Elektrikli tekerlekli sandalyenin temizlik yöntemi: Temiz havluyla içini silin.


Uygulamayı indirmek için QR kodunu tarayın




APP'yi yükleyin

Bangbang yürüyüş ios

(Android)

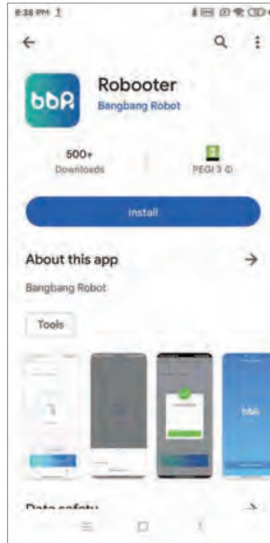


Taramadan sonra yukarıdaki ekran görüntülenir, tıklayarak **Install** kurmak için mobil uygulama.

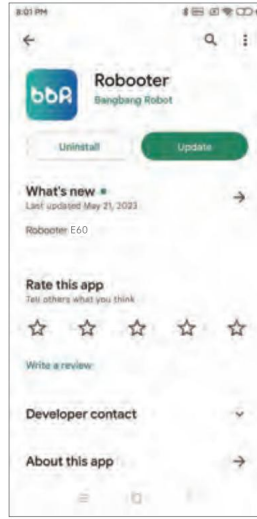


Yukarıdaki ekran mobil uygulamayı kurulumunun tamamlandığını gösteriyor tamamlamak.

Tı kılavuz **GO** Mobil uygulamayı açmak için yukarıdaki ekrana tıklayın


(iOS)

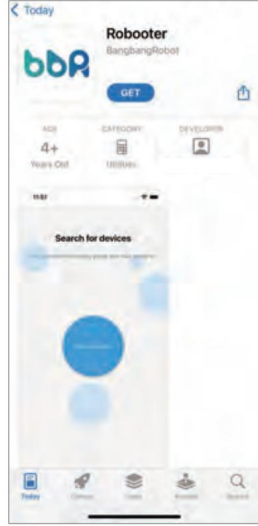

Taramadan sonra yukarıdaki ekran görüntülenir, tıklayarak "GET" kurmak için mobil uygulama.

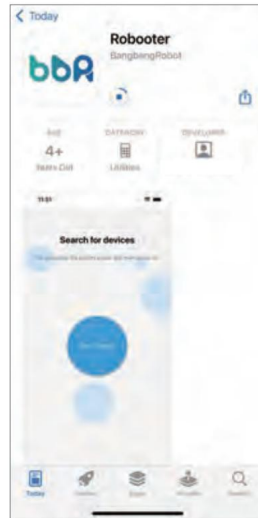


Yukarıdaki ekran mobil uygulamayı yüklediğini gösterir

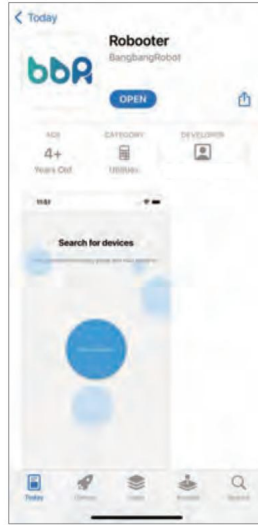


Yukarıdaki ekran mobil uygulamayı kurulumunun tamamlandığını göstermektedir.

Tıklamak **OPEN** Mobil uygulamayı açmak için yukarıdaki ekrana tıklayın.

Cihazı Bağla

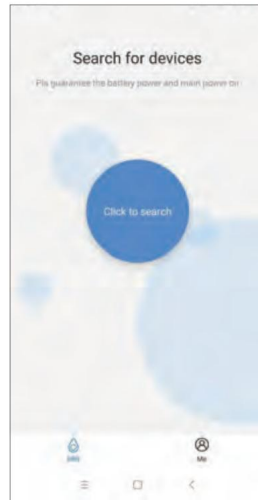


Tıklamak **Click to search** Yukarıdaki ekranda cihaz araması yapın.

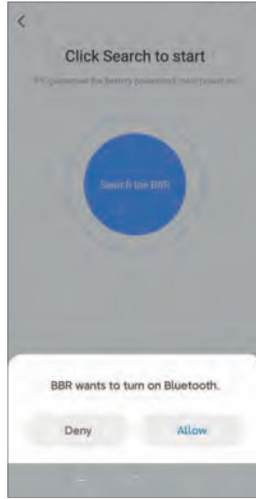

Not: Telefon izinlerini edinin

Tı klamak **Allow** Yukarıdaki ekranda mobil cihazınızın Bluetooth'unu açmak için

APP'yi yükleyin

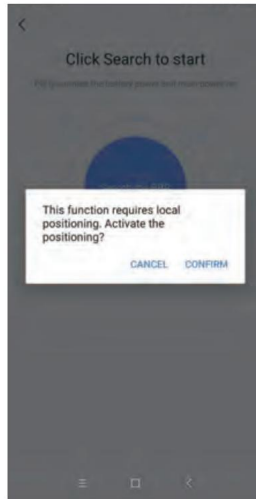


Not: Telefon izinlerini edinin

Tı klamak **CONFIRM** Yukarıdaki ekranda telefonunuzun konum özelliğini açmak için;



Not: Telefon izinlerini edinin

Telefonunuzun konumunu açmak için yukarıdaki ekranda "Konum erişimi"ne tıklayın.

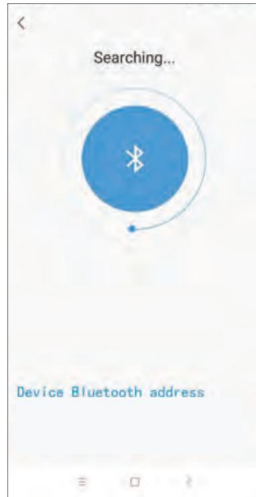


Yukarıdaki işlem tamamlandıktan sonra mobil uygulama cihazı aramaya başlar.

T1 kılavuz

0F:85EC:73:15:05

Mobil uygulama ile cihazı eşleştirmek için.

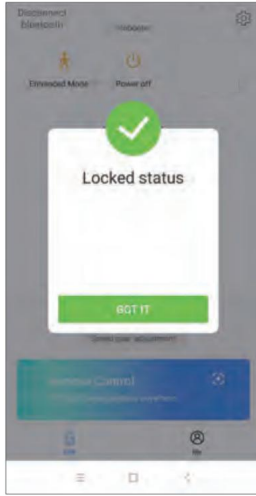


Not:Tekerlekli sandalye kilit modundayken, bu arayüzü görüntüleyin. Tekerlekli sandalyeyi açtıktan sonra, otomatik olarak kilit moduna girin. Uygulamayı yalnızca cihazın kilidini açtıktan sonra kullanın. Tekerlekli sandalye.

Yukarıdaki ekran bağlantı'nın başarılı olduğunu gösteriyor.

Tı klamak **BGT IT** Yukarıdaki ekranda elektrik durum ekranına erişmek için


tekerlekli sandalye

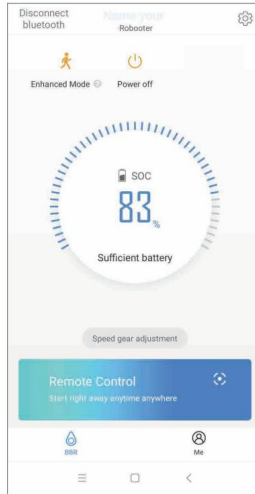


Tı klamak  cihazı kapatmak için.

Tı klamak **Disconnect bluetooth** bluetooth bağlantısını kesmek için.

Tı klamak **Speed gear adjustment** Cihazın hızını ayarlamak için. (5 vitesle ayarlanabilir hız)

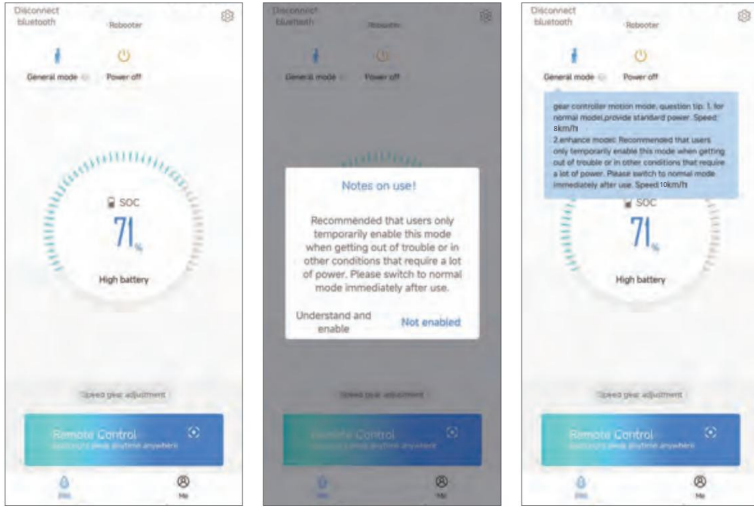


Tı klamak  gelişmiş mod ayarlaması na ve genel moda erişmek için durum ekranı nda ayarlama.

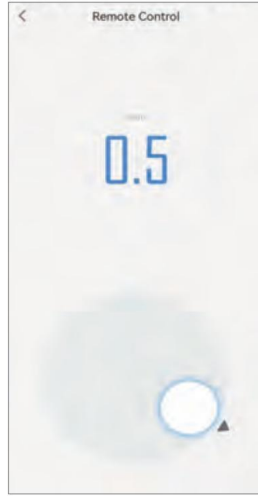


Ti Klamak **Remote Control** uzaktan kontrol moduna erişmek için durum ekranı nda

İleri gitmek için yukarı , geri gitmek için aşağı , sola dönmek için sola, sağa dönmek için sağa dönün.

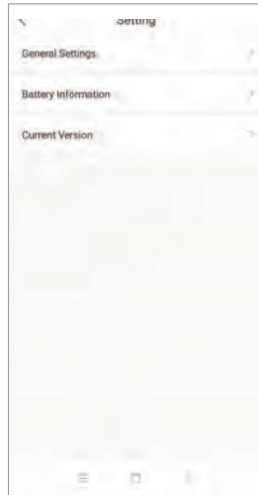


Ti Klamak  Ayarlar ekranı na erişmek için sağ üst köşede

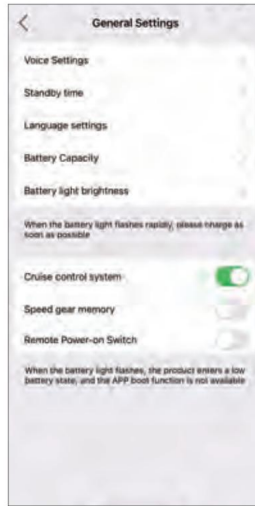

Genel ayarlar moduna erişmek için ayarlar ekranında "Genel Ayarlar"ı tıklayın.

Seyir kontrol sistemi: Seyir kontrolünü kapatmak için sola kaydırın, seyir kontrolünü açmak için sağa kaydırın.

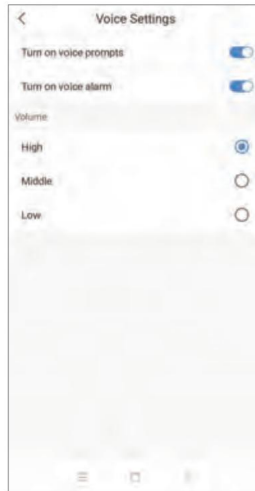


Ses ayarları moduna erişmek için Genel ayarlarda "Ses ayarları"na tıklayın.

Sesli uyarıları açın: Sesi kapatmak için sola, açmak için sağa kaydırın.


Sesli alarmı açın: Sesi kapatmak için sola, açmak için sağa kaydırın.

Ayarlanabilir 3 kademeli ses seviyesi: Yüksek, Orta, Düşük.

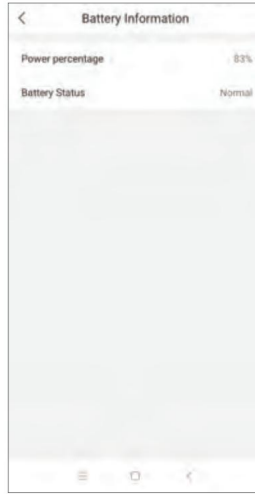

Ayarlar ekranında "Pil bilgisi"ne tıklayarak pil bilgisi ekranına ulaşabilirsiniz.

Pil güç yüzdesini ve pil durumunu gösterir.

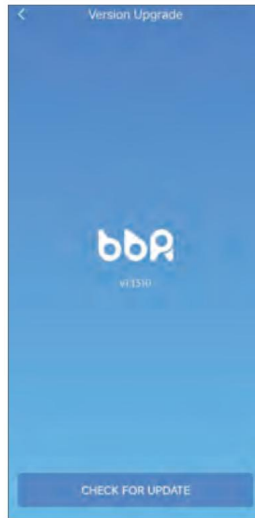

Sürüm yükseltme moduna erişmek için ayarlar ekranında "Mevcut Sürüm"e tıklayın.

Mevcut cihaz sürümünü göster.

Tı klmak

CHECK FOR UPDATE

Cihazın sürümünü yükseltmek için.

Robooter E60 Ürün Kılıfı, Shanghai Bangbang'ın fikri mülkiyet haklarına sahiptir. Robotics Co., Ltd. (bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır); Telif hakkı Şirkete aittir.

Bu ürün (aksesuarlar ve yazılım tasarımı dahil) Bangbang tarafından geliştirilmiş veya üretilmiştir ve fikri mülkiyet hakları ve mülkiyet hakları Şirkete ait olacaktır. Yazılım olmadan

Şirketin izni olmaksızın, bu kılıfın herhangi bir içeriğinin kopyalanması, dağıtılması veya tercüme edilmesi yasaktır ve Buradaki içerik.

Şirket, Robooter E60 Ürün Kılıfı'nı sorumlu bir tutumla derlemektedir. Ancak, Şirket doğruluğunu garanti etmez. Robooter E60 Ürün Kılıfı'nı yazılım teknik bir belgedir, üçüncü şahıslara imza veya göndermede bulunan hiçbir içerik olmaksızın. Şirket hiçbir sorumluluk üstlenmez.

Yazılımın hatası nedeniyle kullanıcıların yanlış anlamasından kaynaklanan bağlar. Şirket herhangi bir Bunun sorumluluğu.

Kullanıcılar tarafından kullanılan Shanghai Bangbang Robotics Co., Ltd.'nin tüm ürünleri çalıştırılacaktır. Robooter E60 Ürün Kılıfı yazılımı ve Şirketin resmi web sitesine (<https://www.roboteer.com>). Kullanıcılar Ürün'de belirtilen yasaklı maddelerin ihlal edilmesine izin verilmez.

Kılıf yazılımı. Kullanıcılar veya üçüncü taraflar Robooter E60'a uygun şekilde kesinlikle çalışmazlarsa

Ürün Kılıfı yazılımında belirtilen yasaklı maddeleri ihlal ederek veya Robooter E60 Ürün Kılıfı yazılımında belirtilen yasaklı maddeleri ihlal ederek çalıştırmayın.

kişisel verileri, malvarı veya mal hasarına yol açan durumlarda, ilgili yasal sorumluluklar belirli icracılar tarafından üstlenilen.

Şirketin ürünleri sürekli olarak iyileştirilmekte ve güncellenmektedir. Kullanıcılar, Shanghai Bangbang Robotics Co., Ltd.'nin resmi web sitesini ziyaret ederek kullanıcı talimatlarını ve çalışma koşullarını bilgilerini güncelleyin veya bayilerden güncellenmiş Ürün Kılıfı yazılımını isteyin.

Şirket, Robooter E60 Ürün Kılıfı yazılımını önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

8. Paketleme listesi

Seri No	Malzeme adı	Birim	Miktar	Notlar
1	Elektrikli tekerlekli sandalye	Ayakkabı	1	Pil dahil
2	Ürün Kılıfı yazılımı	Sayı	1	
3	Şarj cihazı	Adet	1	
4	Araç takımı	Adet	1	Altı gen anahtar, açık anahtar, vida dahil

Tablo 9

	Üretici Tıbbi cihazın üreticisini belirtir.
	Üretim tarihi Tıbbi cihazın üretildiği tarihi belirtir.
	Avrupa Topluluğu/Avrupa Birliği'nde yetkili temsilci Avrupa Topluluğu/Avrupa Birliği'ndeki yetkili temsilciyi belirtir.
	CE UYGUNLUK İŞARETİ CE işareti, Tıbbi Cihaz Ekleri AB Yönetmeliği 2017/745'e uygun biçimde 'CE' baş harflerinden oluşur.
	Seri numarası Belirli bir tıbbi cihazın tanımlanabilmesi için üreticinin seri numarasını belirtir.
	Toplu kod Üreticinin parti kodunu belirtir, böylece parti veya lot tanımlanabilir.
	Tıbbi cihaz Öğenin tıbbi cihaz olduğunu gösterir.
	Son kullanma tarihi Tıbbi cihazın kullanılması gereken tarihi belirtir.
	İlk X katı cisimler için test yapılmadığı, ikinci X ise cihazın su geçirmezlik seviyesini ifade ediyor.
	Elektrikli ve elektronik ekipman atıkları (AEEE) için ayrı toplamayı belirtir.
	Alt pakete istiflenebilecek aynı taşıma paketi/öğelerinin maksimum sayısı. Burada "n" sayısı nırlayıcı sayıdır.
	Bu, dağıtım paketlerinin nakliye ve/veya depolama için doğru dik pozisyonudur.
	Dağıtım paketleri yağmurdan uzak tutulmalı ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir. koşullar.
	Dağıtım paketlerinin içerikleri kırılabilir olduğundan, dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. Dikkatle.

ROBOOTER



Şanghay BangBang Robotics Co., Ltd.

EKLE: Oda 501, Bina 3, No. 188 Zhongchen

Yolu, Songjiang Bölgesi, Şanghay

Tel: 00862137777720

E-posta: info@bangbangrobotics.com Web

sitesi: www.bangbangrobotic.com



Kingsmead Service BV ADD:

Zonnehof 36,2632 BE, Nootdorp, Hollanda



TEL:0031(0)64657 1005

Revizyon tarihi: 20241206

dosya No.: BBR-QP-E60-01(CE) Rev: V1.4